



## Balanza pesabebés KERN MBC

Balanza pesabebés de elegante diseño con aprobación de homologación y médica para el uso profesional móvil o fijo en el diagnóstico médico



**Nuestro distribuidor especializado**

---



### Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Popular en pediatría: la gran superficie de reposo, con su curva óptima y ergonómica, es ideal para el pesaje seguro de los bebés
- **2** Función especial para neonatologías: función diferencial para el cálculo del de peso antes y después de la ingestión de alimentos
- ABS - materia plastica robusto. Higiénica y fácil de limpiar
- Gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura
- Función Hold: por pacientes inquietos tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- KERN MBC: Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
- KERN MBC-E: idéntico a MBC, pero sin adaptador de red, especialmente adecuado para uso móvil, por ejemplo, para parteras


### Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminado, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de bandeja A×P×A 600×280×55 mm
- Dimensiones totales A×P×A 600×407×120 mm
- Dimensiones totales con tallímetro (opcional) A×P×A 890×470×175 mm
- KERN MBC: Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- KERN MBC-E: Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA
- Peso neto aprox. 5,5 kg


### Accesorios

- **1** Tallímetro para fijar en la balanza, campo de medición de 80 cm, división 1 mm, KERN MBC-A01
- **3** Tope pies/cabeza para la fijación al plato con superficie, para más seguridad al pesar niños pequeños. Alcance de suministro: 1 tope para la cabeza y otro para los pies en cada balanza, KERN MBC-A05
- **4** Bolsa de transporte para uso móvil, solo sin barra medidora montada, KERN MBC-A02
- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05
- Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h, sólo en combinación con KERN YKA-44, KERN MBC-A08
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01
- Adaptador de red externo, 100-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK, KERN YKA-43 y adaptador de red externo, 100-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, KERN YKA-44

#### ESTÁNDAR

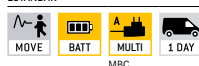

#### OPCIÓN

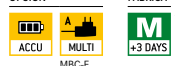

#### FÁBRICA



\* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				M	KERN
MBC 15K2DM	6   15	0,002   0,005	0,002   0,005		965-128.
MBC 15K2DEM	6   15	0,002   0,005	0,002   0,005		965-128.
MBC 20K10M	20	0,01	0,01		965-128.
MBC 20K10EM	20	0,01	0,01		965-128.

### Pictograma



**Función Hold (retención):** en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio



**Alimentación con baterías:**  
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato



**Alimentación con acumulador interno:**  
Juego de acumulador recargable



**Fuente de alimentación de enchufe universal:**  
con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH



**Homologación:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles



**Envío de paquetes:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días